

## EDS 200 S

Ameliyat Masası / Operating Table

Olağanüstü uyarlanabilirlik için tasarlandı.  
*Designed for exceptional adaptability.*

Genel Cerrahi, Üroloji, Jinekoloji, Ortopedi, Göz, Beyin Cerrahisi, KBB, Kardiyoloji vb. birçok operasyon kullanımına uygun olarak üretildi!  
*General surgery, Urology, Gynecology, Orthopedics, Eye, Brain Surgery, ENT, Cardiology etc. we are designing it to be suitable for many operations.*

Kalite söz konusu olduğunda taviz vermiyoruz.  
ET-300 C, tüm çerçeveye daha fazla güç ve korozyon direnci sağlamak için yüksek kaliteli Paslanmaz Çelik kullanmaktayız.

*When it comes to quality, we do not compromise.  
The ET-300 C uses high quality Grade Stainless Steel that is further treated to provide the entire frame with greater strength and resistance to corrosion.*



# AMELİYAT MASASI / OPERATING TABLE

## MASA POZİSYONLARI

Baş Bölümü (Manuel)	55° Yukarı - 90° Aşağı, çıkarılabilir.
Lateral (Kumandalı)	25° Sağ - 25° Sol Lateral-Tilt pozisyonu
Trendelenburg (Kumandalı)	30°
TersTrendelenburg (Kumandalı)	25°
Sirt Bölümü (Kumandalı)	60° Yukarı / -40° Aşağı (+-15°)
Ayak Bölümü (Piston)	30° Yukarı - 90° Aşağı - 90° Yana açılabilir, çıkarılabilir.
Tip	Elektro-mekanik (Kumandalı)
Kayma (Opsiyonel) (Kumandalı)	300 mm

## TABLE POSITIONS

Head Section (Manual)	55° Up - 90° Down, removable.
Lateral (Controlled)	25° Right - 25° Left Lateral-Tilt position
Trendelenburg (Controlled)	30°
TersTrendelenburg (Controlled)	25°
Back Section (Controlled)	60° Up / -40° Down (+-15°)
Foot Section (Piston)	30° Up - 90° Down - 90° Side opening, removable.
Type	Electro-mechanical (Controlled)
Slip (Optional) (Controlled)	300 mm

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik	710 mm x 1010 mm
Yükseklik (minder)	760 mm x 1060 mm
Masaüstü Boyu	600 mm x 2150 mm
Baş Bölümü	225 mm x 355 mm
Sirt Bölümü	530 mm x 625 mm
Oturma Bölümü	530 mm x 530 mm
Ayak Bölümü(Sağ) (Piston)	255 mm x 710 mm
Ayak Bölümü (Sol) (Piston)	255 mm x 710 mm
Voltaj	230V 50 HZ
Akü Şarj Voltajı	24 V DC
El Kumandası Voltajı	5 V DC
Motor Voltajı	220VAC, %α- 24V DC 10A
Akü	Kuru Tip/Bakıma İhtiyaç Duymayan
Akü Kapasitesi	7Ah, 2V DC
Hasta Taşıma Kapasitesi	300 Kg.
Batarya	45 dk.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height	710 mm x 1010 mm
Height (cushion)	760 mm x 1060 mm
Desktop Size	600 mm x 2150 mm
Head Division	225 mm x 355 mm
Back Section	530 mm x 625 mm
Seating Section	530 mm x 530 mm
Foot Section (Right) (Piston)	255 mm x 710 mm
Foot Section (Left) (Piston)	255 mm x 710 mm
Voltage	230V 50 HZ
Battery Charge Voltage	24 V DC
Hand Control Voltage	5 V DC
Engine Voltage	220VAC, %α- 24V DC 10A
Battery	dry battery/maintenance free
Battery Capacity	7Ah, 2V DC
Patient Carrying Capacity	300 kg.
Battery	45 minute



## AMELİYAT MASASI / OPERATING TABLE



### EDS 200 S

Ameliyat Masası / Operating Table

Masanın; aşağı/yukarı, yatay kayma, sırt bölümü aşağı/ yukarı, Trendelenburg/ters Trendelenburg, sağ/sol lateral, fleks ve refleks hareketleri elektrikli motor sistemi ile gerçekleşir. Bu hareketler, kablolu el kumandası ile sessiz ve titreşimsiz olarak yapılır.

Operatig Table; up/down, horizontal sliding, back up/down, Trendelenburg/reverse Trendelenburg, right/left lateral, flex and reflex movements are performed by an electric motor system. These movements are made silently and without vibration with the wired hand control.



### OBEZİTE Ameliyat Masası Bariatric Operating Table

## EDS 200 S

### Ameliyat Masası / Operating Table

Masadaki hem kablolu kumanda hem de kontrol paneli her zaman kullanıma hazır beklemededir. Bu kontrolörlerden birinin arızalanması durumunda, arıza güvenlik sistemimiz diğerinin normal şekilde çalışmaya devam etmesine izin verir.

*Both the wired controller and the control panel on the table are always on standby. In the event where either one of these controllers malfunction, our failsafe allows the other to continue functioning normally.*


Anestezi Çerçevesi  
Anaesthesia Frame

Omuz Destek  
Shoulder Support

Kol Destek  
Arm Support

Jinekolojik Destek  
Gynecologic Support

Vücut Bağlama Kemerini  
Body Belt

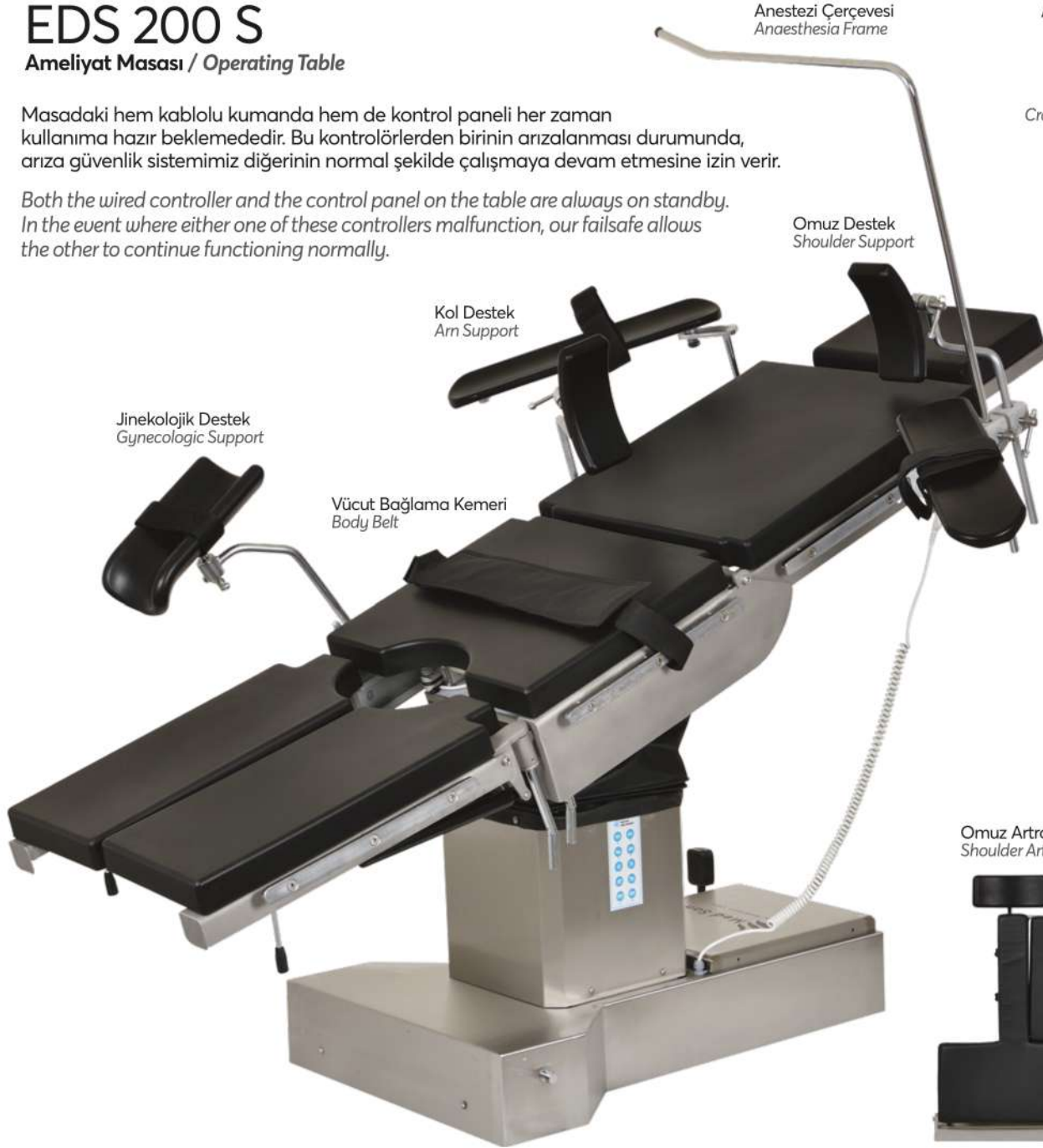

### Ameliyat Masası Ekipmanları / Operating Table Equipment

Kraniyel Sabitleme Seti  
Cranial Stabilization System



Kafalık  
Head Support



El Kumandası  
Remote Control



Kontrol Kartı  
Control Board



Döner Kelepçe  
Clamb



Kelepçe  
Clamb



Motor Çeşitleri  
Engines



Omuz Artraskopisi  
Shoulder Arthroscopy

